



ESTREMO
CITIEFFE NAILING SYSTEM

Chiodo endomidollare tibia

✓ Design unico per
accesso sovrarotuleo
semplificato

✓ Molteplici opzioni
per migliorare
la stabilità

citieffe[®]
Essential moves in Trauma

Indicato per il trattamento delle fratture diafisarie di tibia




- In lega di titanio ASTM F136
- Lunghezze disponibili:
da 260 a 395 mm con incrementi di 15 mm
- Chiodo solido: diametro 8 mm
- Chiodo cannulato disponibile in diversi
diametri: 9, 10, 11 mm
- Opzioni versatili di bloccaggio prossimale
guidato
- Possibilità di bloccaggio distale statico
o dinamico

Design unico per un accesso sovrarotuleo semplificato

Accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

- — Tecnica operatoria interamente eseguibile attraverso la cannula paratessuti
- — Inserimento chiodo facilitato
- — Bloccaggio delle viti guidato

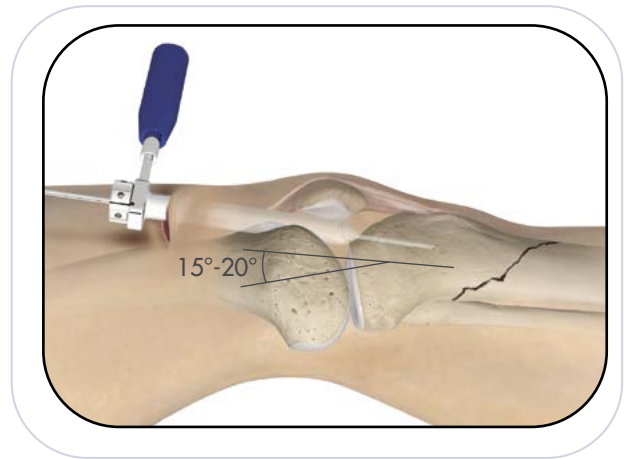

Courtesy of Massimo "Max" Morandi, MD, FACS
LSU Health Sciences Center - Shreveport, Louisiana USA

Molteplici opzioni per migliorare la stabilità

Bloccaggio prossimale multidirezionale

- — 2 viti incrociate a 40°
- — 2 viti parallele con accesso mediolaterale

Riduzione dei frammenti ossei del piatto tibiale

- — 2 viti out-nail guidate



Bloccaggio distale versatile

- — Due fori per viti parallele in mediolaterale
- — Foro e asola distale in anteroposteriore per bloccaggio dinamico o statico



Possibilità di approccio chirurgico pararotuleo a ginocchio flesso

ESTREMO

CITIEFFE NAILING SYSTEM

Chiodo endomidollare tibia



fissazione
INTERNA



chiodi



citieffe®
Essential moves in Trauma

 Citieffe srl a socio unico
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (Bologna - Italy)
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com

CE
0476