



# RONDO

## Sistema di viti cannulate indicato per piccoli e medi frammenti

Ø 3



Ø 4




Ø 5

- ✓ Rondella integrata e orientabile
- ✓ Inserimento e rimozione facilitati
- ✓ Codice colore per viti e strumentario

**citieffe**<sup>®</sup>  
Essential moves in Trauma

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.

Le viti Rondò sono viti cannulate metaepifisarie con filettatura da spongiosa indicate per la fissazione di fratture, fusioni e osteotomie.

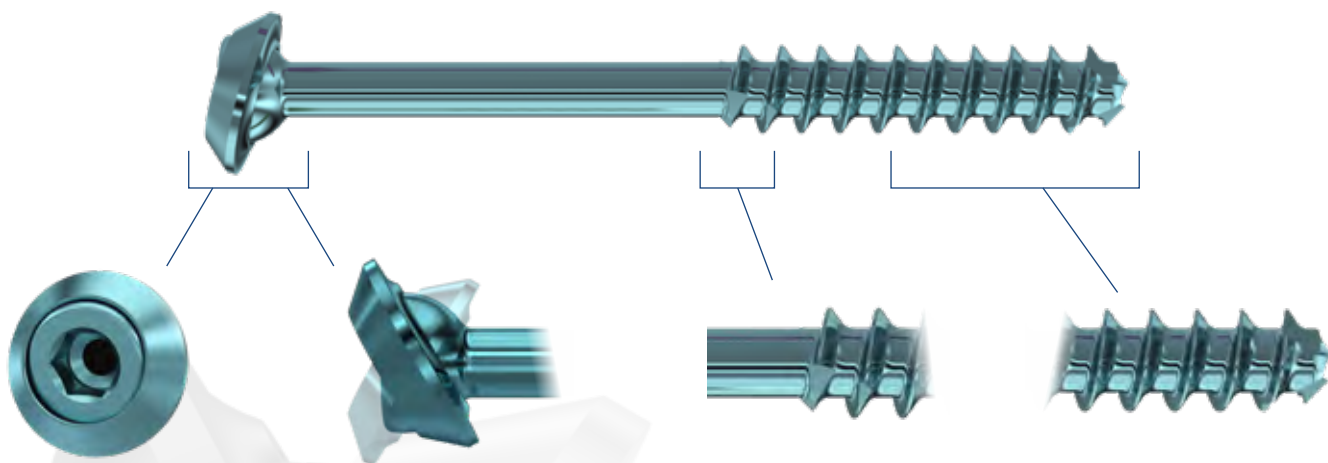

**Rondella integrata** solidale alla vite per una fissazione e rimozione sicura

**Rondella orientabile** che consente una migliore adattabilità alla superficie ossea

**Tagliante posteriore** per una rimozione facilitata

**Filetto a passo singolo** per una migliore compattazione e compressione della frattura

### Frattura bimalleolare di caviglia



Pre-operatorio



Post-operatorio

## Diametri e lunghezze disponibili per piccoli e medi frammenti

TITANIO

STERILE



Ø3mm

Lunghezze da 10 a 30mm  
(incremento 2mm)



Ø3mm

Lunghezze:  
da 32 a 50mm (incremento 2mm) e 55mm



Ø4mm

Lunghezze da 14 a 65mm  
(14 - 40 incremento 2mm) (45 - 65 incremento 5mm)



Ø4mm

Lunghezze da 50 a 80mm  
(incremento 5mm)



Ø5mm

Lunghezze da 20 a 70mm  
(20 - 50 incremento 2mm) (55 - 70 incremento 5mm)




Ø5mm

Lunghezze da 50 a 130mm  
(incremento 5mm)

## Strumentario

## Strumentario

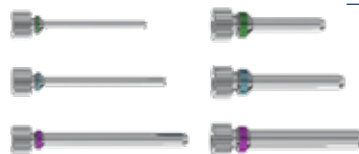

Guida cannule\*  
Trocar  
Cannule


\*Protezione dei tessuti molli e  
posizionamento di 1 o 2 viti parallele




Misuratore viti



Frese cannulate  
attacco AO

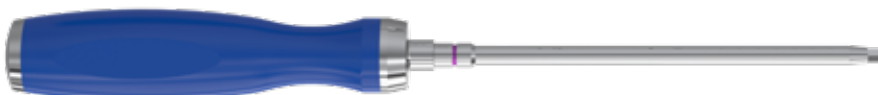

Giraviti a mano e  
motorizzati con attacco AO

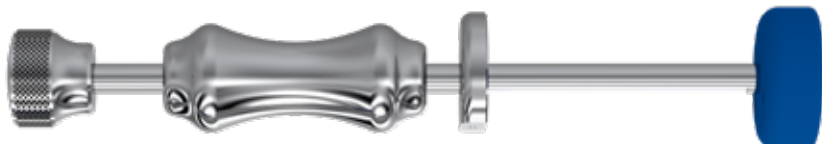

Estrattore  
rondella

# RONDO

## Sistema di viti cannulate indicato per piccoli e medi frammenti

**citieffe**<sup>®</sup> | **INSPIRED BY PEOPLE**  
Essential moves in Trauma | **MOVED BY INNOVATION**

 **Citieffe s.r.l.**  
Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy  
Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870  
info@citieffe.com - www.citieffe.com

**CE**  
**1936**