

Viti ossee da corticale e da spongiosa




Equilibrio delle sollecitazioni sulle corticali

Recupero di un eccessivo
affondamento senza perdita di tenuta

Adatte ad ogni paziente:
viti senza Nichel o
rivestite in idrossiapatite


citieffe[®]
Essential moves in Trauma

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.

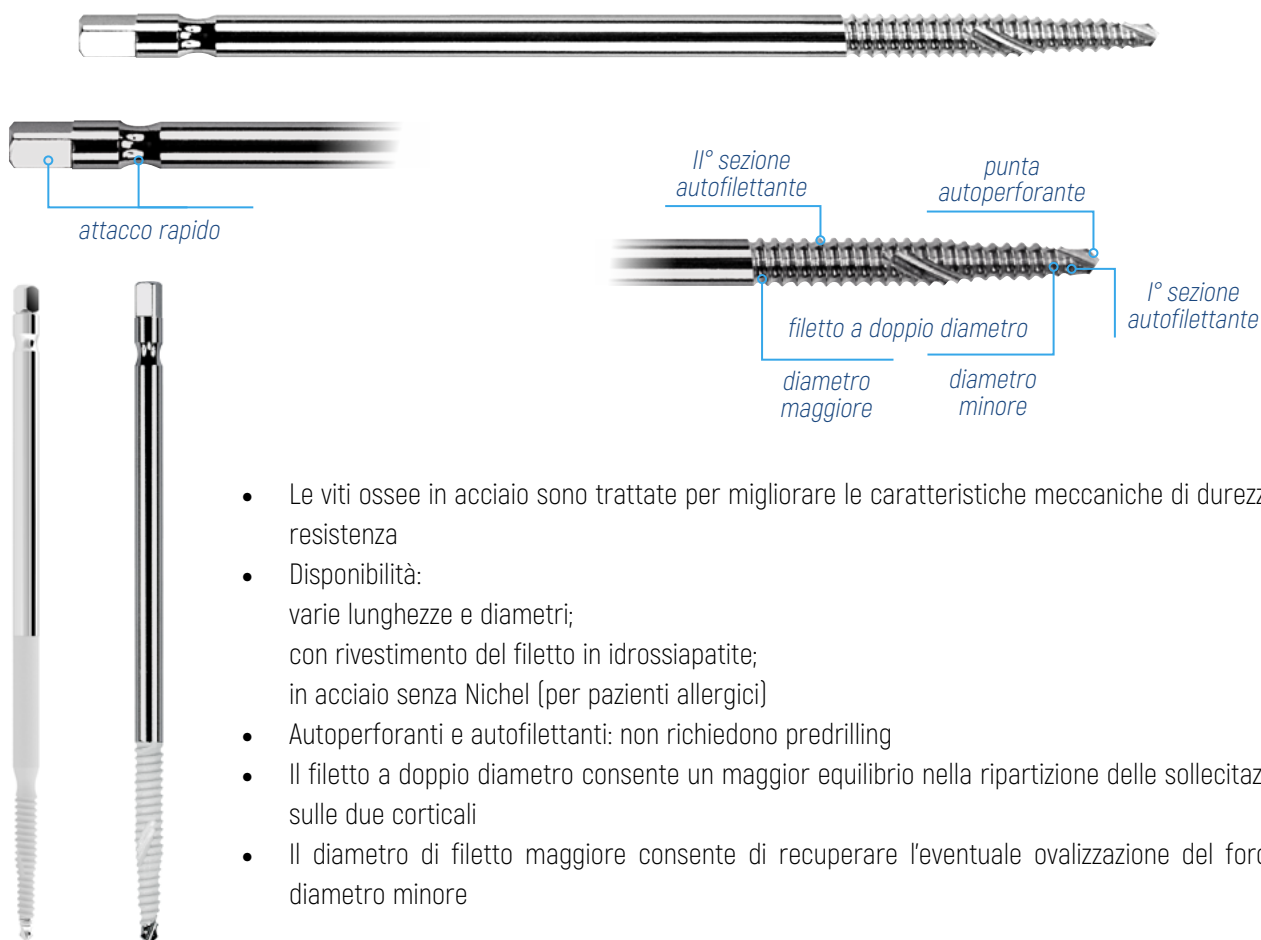

- Le viti ossee in acciaio sono trattate per migliorare le caratteristiche meccaniche di durezza e resistenza
- Disponibilità:
varie lunghezze e diametri;
con rivestimento del filetto in idrossiapatite;
in acciaio senza Nichel (per pazienti allergici)
- Autoperforanti e autofilettanti: non richiedono predrilling
- Il filetto a doppio diametro consente un maggior equilibrio nella ripartizione delle sollecitazioni sulle due corticali
- Il diametro di filetto maggiore consente di recuperare l'eventuale ovalizzazione del foro di diametro minore

Vite ossea da spungiosa

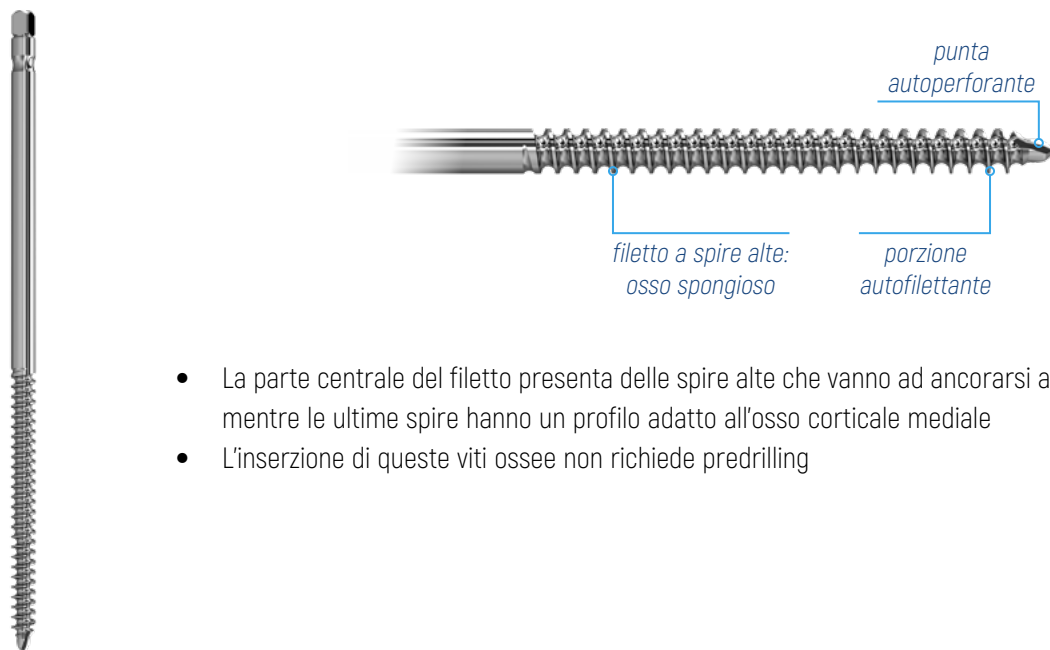

- La parte centrale del filetto presenta delle spire alte che vanno ad ancorarsi all'osso spungioso, mentre le ultime spire hanno un profilo adatto all'osso corticale mediale
- L'inserzione di queste viti ossee non richiede predrilling